

Børnehjælpemidler



Nimbo Walker - gangstol/gangvogn



Nimbo Walker giver mere mobilitet og forbedrer kropsholdningen.

Støtter brugeren bagfra, hvilket er med til at fremme en oprejt stilling og forlængelse af kroppen, hvilket muliggør et mere flydende gangmønster.

Ideel til børn og unge med nedsat muskelkoordination/spastisk lammelse (cerebral parese) eller andre former for neurologiske tilstande.

Har højdejusterbare ben, således den kan følge brugeren i flere år. Højdejusteringen foretages let, og uden brug af værktøj.

Bløde gummihjul giver bedre trækraft og forhindrer sidevridning.



Bagstopper på baghjulene forhindrer rulning bagud.

Drejelige forhjul forøger manøvreabiliteten, og gør det lettere at dreje.

Forhjulene kan retningslåses.

Hjulstørrelse:

Forhjul: Ø 12 x 2,5 cm

Baghjul: Ø 12,3 x 3,3 cm



Letvægtsrammen er produceret i aluminium, og gaflerne er produceret i plast for bedre holdbarhed.



Varenummer	Beskrivelse	Håndtagshøjde	Farve	HMI-nr.
63705100010	Nimbo Walker gangstol, X-Small	41-51 cm	Rød	137946
63705100020	Nimbo Walker gangstol, X-Small	41-51 cm	Blå	137946
63705100110	Nimbo Walker gangstol, Small	51-68 cm	Rød	137949
63705100120	Nimbo Walker gangstol, Small	51-68 cm	Blå	137949
63705100210	Nimbo Walker gangstol, Medium	61-80,5 cm	Rød	137952
63705100220	Nimbo Walker gangstol, Medium	61-80,5 cm	Blå	137952
63705100310	Nimbo Walker gangstol, Large	75,5-94,5 cm	Rød	137955
63705100320	Nimbo Walker gangstol, Large	75,5-94,5 cm	Blå	137955
63705100440	Nimbo Walker gangstol - X-Large	94-109 cm	Sort	137958

Nimbo Walker - gangstol/gangvogn, tilbehør



Nimbo underarmsstøtte¹

2 stk. pr. sæt.

Yderst justérbar for korrekt armstøtte.

Højde-, dybde- og vinkeljustérbar.

Nimbo hofte-/bækkenstøtte²

Giver stabilitet til bækkenet for bedre ambulation.

Kan breddejusteres.

Inkl. bækkenbælte.

Nimbo sædesele³

Hjælper med til, at placere bækkenet korrekt og bevæger sig med brugerens naturlige gangmønster.

Selen er justérbar.

Idéel til brugere som ikke kan stå selv.


Nimbo hvilesæde (opklapbart)⁴

Giver brugeren mulighed for let at kunne hvile sig.

Let at montere.

Varenummer	Beskrivelse	Mål
63705300200	Underarmsstøtte, 2 stk. til Nimbo XS + S + M ¹	13 cm (L) - 9-11,5 cm (H)
63705300250	Underarmsstøtte, 2 stk. til Nimbo L + XL ¹	20 cm (L) - 13-20 cm (H)
63705300100	Hofte-/Bækkenstøtte til Nimbo ²	
63705300300	Sædesele til Nimbo XS + S + M + L ³	28 x 23 cm (L/B)
63705300350	Sædesele Til Nimbo XL ³	40 x 28 cm (L/B)
63705200010	Hvilesæde til Nimbo XS ⁴	17,4 x 11,1 cm (B/D)
63705200110	Hvilesæde til Nimbo S ⁴	28 x 17 cm (B/D)
63705200210	Hvilesæde til Nimbo M ⁴	28 x 17 cm (B/D)
63705200310	Hvilesæde til Nimbo L ⁴	28 x 17 cm (B/D)
63705200410	Hvilesæde til Nimbo XL ⁴	29,7 x 19,7 cm (B/D)

RCN Walker - GW120 Mini, gang-/gåstol

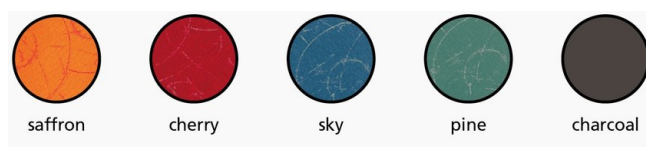

Denne gang-/gåstol yder høj sikkerhed, og dens udstyr understøtter børnenes trang til at bevæge sig, inden for sikre betingelser.

Ved hjælp af let højdeindstilling (kan indstilles i 7 højder via clips), kan denne gang-/gåstol bruges af personer op til en højde på 1,55 m.

Anti-Tip rammens udformning, det intererede sæde og sikkerhedsstroppen, hjælper alle med til, at reducere frygten for at falde, samt beskytter mod fald.

Sædepude med skumkerne og inkontinensbetræk - fås i flere farver (5 farver).

Rygstøtte fremstillet i Textilene® stof - fås i flere farver (8 farver).

Inkl. lille taske til opvaring af personlige ejendele.

Fås også med vægbeskyttere, lavet af PUR-skum (AFS-model).

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

6 stk. Ø75mm hjul, heraf 4 med bremse.

Tekniske data:

Sædehøjde: 39-54 cm

Gribehøjde: 59,5-74,5 cm

Sædebredde: 38,5 cm

Sædedybde: 26 cm

GW 120 Mini:

Udv. mål: 89x72x88,5-103,5 cm (L/B/H)

GW 120 AFS Mini:

Udv. mål: 95x78x88,5-103,5 cm (L/B/H)

Maks. belastning: 150 kg

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve	Mål (L/B/H)
630135	116633	RCN Walker GW120 Mini, gang-/gåstol	Oplys v/bestilling	89 x 72 x 88,5-103,5 cm
630136	116888	RCN Walker GW120 AFS Mini, gang-/gåstol	Oplys v/bestilling	95 x 78 x 88,5-103,5 cm



Moxie GT er en højdejustérbar gangtræner, der fås i 3 forskellige størrelser.

Den tilbyder en enorm alsidighed til at hjælpe børn eller voksne med stabilitet, mens de forbedrer deres gangevne, og lærer den enkelte bruger at tage skridt uden hjælp.

- Tilskynder til tidlig kognitiv- og læringsudvikling.
- God træning for Kardiorespiratorisk styrkelse, samt kondition.
- Reducerer stivhed i kroppen og forbedrer bevægelsen.
- Øger bevidsthed og hovedkontrol.

Moxie GT kan bruges i enten posterior eller anterior position (forfra/bagfra).

Den lille og mellemstore Moxie GT fås i enten grønne eller blå rammefarver. Den store størrelse fås i en grå rammefarve.

Højdejustérbar i 2,5 cm intervaller.

Medium og Large modeller kan sammenfoldes for lettere opbevaring og transport. De drejelige hjul kan låses i ikke-drejelig position.

Retningsbremse tillader både mobilitet fremad og bagud, eller som kun fremadgående. Hjullåse på alle fire hjul sikrer, at Moxie GT står stille.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Håndtagshøjde	Farve
63GT10002GB	122096	Moxie GT gangtræner, small	38-47 cm	Blå
63GT10002GG	122096	Moxie GT gangtræner, Small	38-47 cm	Grøn
63GT20002GB	122097	Moxie GT gangtræner, Medium	56-64 cm	Blå
63GT20002GG	122097	Moxie GT gangtræner, Medium	56-64 cm	Grøn
63GT30002GGY	122098	Moxie GT gangtræner, Large	74-99 cm	Grå

Moxie GT - gangtræner, tilbehør

Stort tilbehørsprogram findes - alt tilbehør installeres og justeres uden brug af værktøj.



Moxie håndløkke¹

Kan monteres hvor som helst på styret.
Kan bruges som et par eller alene, giver
tabilitet og sikkerhed.
Sælges enkeltvis.

Moxie håndgreb²

2 stk. pr. sæt.
Kan monteres hvor som helst på styret, og kan
højdejusteres og drejes, så de kan tilpasses
brugerens behov og komfort.

Moxie underarmsstøtte³

2 stk. pr. sæt.
Højde-, dybde- og vinkeljustérbar, så de kan
tilpasses brugerens behov og komfort.
Kontureret armlæn med arm- og håndledsrem.

Kan monteres hvor som helst på styret.

Moxie krops-/bækkenstøtte⁴

Polstret støtte til krop eller bækken.
Hjælper med til, at fastgøre overkroppen i den
ønskede vinkel

Højde-, dybde-, bredde- og vinkeljustérbar.

Kan åbnes for lettere forflytning.
Stropper hjælper med til, at justere pasform,
foroverbøjning og vinklen på brugeren.

I sin laveste position, kan den bruges som
bækkenstøtte.

Kan justeres imens brugeren er igang med
træning.

Moxie hoftese⁵ *(Bruges sammen med håndgreb)*

Hjælp til korrekt hoftepositionering, polstret for komfort - placeringen af stropperne på styret, vil påvirke brugerens bækkenposition.

Selen kan højdejusteres og giver brugeren mulighed for at skifte vægten fra det ene ben til det andet.

Stropperne kan forkortes, for at hjælpe med, at bære vægten, eller forlænges til brug som sikkerhedsslynge.

Moxie ankelstrop⁶

2 stk. pr. sæt.

Ideal til brugere med spasticitet, dårlig motorisk kontrol, ataksi og overdreven adduktion.

Længdejusterbare, polstrede ankelbånd opretholder ben og / eller fødder i abduktion og forhindrer benene i at "sakse".

Fjederklemmer kontrollerer skridtlængden.

Moxie lårsele⁷

2 stk. pr. sæt.

Kan placeres længere fra eller tættere på brugeren for at begrænse abduktion / adduktion.

Følger et naturligt gangmønster, så vægten skiftes fra det ene ben til det andet.

Højdejustérbar.

Moxie sædesele⁸

Hjælper med til, at placere bækkenet korrekt og bevæger sig med brugerens naturlige gangmønster.

Selen er justérbar.

Ideal til brugere som ikke kan stå selv.


Moxie styrestang⁹

Tillader plejeperson eller terapeut at hjælpe med gangtræning.

Kan rotere 180°, hvilket gør det muligt enten at trække forfra eller skubbe bagfra.

Varenummer	Beskrivelse
63TK1010	Moxie håndløkke ¹
63TK1045	Moxie håndgreb, 2 stk ²
63TK1035S	Moxie underarmsstøtte, 2 stk, Small ³
63TK1035L	Moxie underarmsstøtte, 2 stk, Large ³
63TK1080S	Moxie krops-/bækkenstøtte, Small ⁴
63TK1080M	Moxie krops-/bækkenstøtte, Medium ⁴
63TK1080L	Moxie krops-/bækkenstøtte, Large ⁴
63TK1070S	Moxie hoftese, Small ⁵
63TK1070L	Moxie hoftese, Large ⁵
63GT1060S	Moxie ankelstrop, Small ⁶
63GT1060M	Moxie ankelstrop, Medium ⁶
63GT1060L	Moxie ankelstrop, Large ⁶
63TK1090S	Moxie lårsele, Small ⁷
63TK1090L	Moxie lårsele, Large ⁷
63CE1070S	Moxie sædesele, Small ⁸
63CE1070L	Moxie sædesele, Large ⁸
63TK1020	Moxie styrestang ⁹

RCN bade-/kørestol - DR 100 Mini S

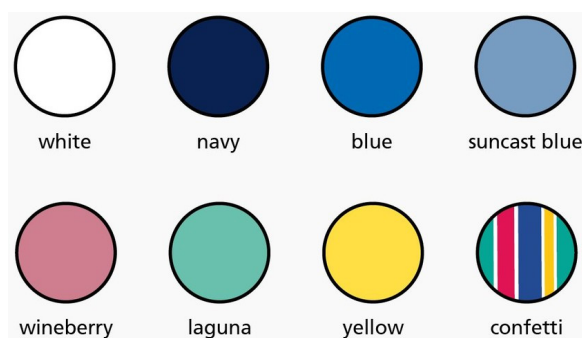

Børnekørestol/badestol velegnet til "selvkørende" børn.

Egner sig perfekt til bad, pool eller f.eks. hydroterapi.

God stabilitet, selv på våde flade, og med en rustfri garanti, er dette et optimalt hjælpemiddel til børn og unge, som ønsker at kunne bevæge sig frit omkring.

Plasticsæde med drænhuller.

Rygstøtte fremstillet i Textilene® stof - fås i flere farver (8 farver).

Aftagelige armlæn.

Inkl. "slide-out" fodstøtte.
22" punktérfrie skubbehjul - begge låsbare.
Ø100 mm forhjul.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.


Tekniske data:

Sædebredde: 36 cm
Sædedybde: 38 cm
Sædehøjde: 46,5 cm
Underbenslængde: 29 cm
Total højde: 76 cm
Total bredde: 64 cm
Total dybde: 78 cm
Vægt: 18 kg
Brugervægt: 120 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
630004	117474	RCN børne bade-/kørestol DR100 Mini S	Oplys v/bestilling

RCN Børnekørestol - DR 400 Mini

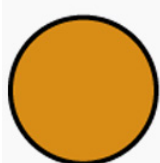

saffron



cherry



sky



pine



charcoal

Børnekørestol velegnet til "selvkørende" børn.

Sæde- og rygpude med skumkerne og vandafvisende betræk (oplys farve v/bestilling).

Armlæn polstret med PUR-skum (oplys farve v/bestilling).



graphite blue cobalt

Inkl. "Drop-out" fodstøtte.

Tøjbeskytter på begge sider.

Skubbebøjle.

22" punktérfrige skubbehjul - begge låsbare. Ø100 mm forhjul.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædebredde: 36 cm

Sædedybde: 40 cm

Sædehøjde: 48 cm

Underbenslængde: 34 cm

Total højde: 101 cm

Total bredde: 63,5 cm

Total dybde: 74 cm

Vægt: 23 kg

Brugervægt: 120 kg

Sikkerhedsbøjle (SB) og benstøtte (BSM) kan tilkøbes - oplyses v/bestilling.

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
630003	117475	RCN børnekørestol DR 400 Mini	Oplys v/bestilling

Otter bruse-/badestol



“Otter” badestol giver støtte og sikkerhed for børn under badning.

Den har et vinkeljusterbart sæde og ryglæn, således den kan imødekomme den enkeltes placeringsbehov.

Benene er justerbare og skridsikre.

Stolen har højde- og breddejusterbare sidestøtter, der kan bruges til positionering af oved eller krop, samt benstropper.

Stoffet er i polyester og kan tages af, og maskinvaskes ved 60 grader.

Ryglæn kan justeres 0-90 grader (4 positioner).

Fås i 3 str.: small, medium, large;

Sædebredde: 41 cm

Sædehøjde: 14-26 cm

Sædedybde: 30 cm (S), 35 cm (M), 40 cm (L)

Ryglænslængde: 40 cm (S), 56 cm (M), 75 cm (L)

Kan sammenfoldes for lettere transport og opbevaring.

Mål sammenfoldet:

Small: 90 x 42,5 x 15 cm (L/B/H)

Medium: 105 x 42,5 x 15 cm (L/B/H)

Large: 122 x 42,5 x 15 cm (L/B/H)

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Brugerhøjde
70555100100	119115	Otter bruse-/badestol - Small	op til 90 cm (brugerhøjde)
70555100200	119116	Otter bruse-/badestol - Medium	80-130 cm (brugerhøjde)
70555100300	119117	Otter bruse-/badestol - Large	110-170 cm (brugerhøjde)



Badestativer kan tilkøbes til "Otter".

Badestativ, højdeindstilleligt:

Med en letvægts-, og easy-care plastikramme og skridsikre ben, giver dette badestativ højde til badestolen for at reducere plejepersonens belastning, mens han/hun bader barnet.

"Quick-release" låse gør, at badestolen let kan monteres på eller fjernes fra rammen.

Bredde: 42 cm
Længde: 78-99 cm
Højde: 14-27 cm

Badestativ på hjul:

Med en letvægts-, og easy-care plastikramme giver dette badestativ højde til badestolen for at reducere plejepersonens belastning, mens han/hun bader barnet.

De fire hjul gør, at barnet let og hurtigt kan køres til-/fra badeområdet.

Bremse på alle fire hjul.

Bredde: 68 cm
Længde: 90 cm
Højde: 51 cm

Varenummer	Beskrivelse	Højde	Belastning
70555200100	Badestativ, højdeindstilleligt	14-27 cm	85 kg
70555200200	Badestativ på hjul	51 cm	85 kg

U-Puder - lejringspuder



Lejringspuder til stabilisering af kroppen under træning, med ovalt hul.

Til børn og voksne.

Fremstillet af 050H polyeterskum beklædt med kunstlæder (skai).

Puderne kan samles efter behov.

Model U-pude til børn består af 3 dele, som hver har et ovalt hul. Der er monteret velcro på begge sider af puderne, således at de kan samles efter behov.

Består af puder i størrelserne:
50x60x8 cm, 50x60x10 cm og 50x60x12 cm.

Hulstr.: 24 x 24 cm (B/D)

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Mål (L/B/H)
33003438	42999	U-pude sæt, barn	60 x 50 x 8/10/12 cm
33003727	43003	U-pude sæt, større børn/voksne	75 x 65 x 10/12 cm



Model U-pude til større børn/voksne består af 2 dele, som hver har et ovalt hul. Øverste og nederste flade på puderne er hvide, pudernes bund er sort.

Består af puder i størrelserne:
65x75x10 cm og 65x75x12 cm.

Hulstr.: 34 x 34 cm (B/D)

